

MANUSEIO E LIMPEZA



Sempre lave bem as mãos antes de manusear a lente;


- Não usar sabões ou xampus na lente;
- Garanta pelo menos 15 segundos de movimento circulares com a ponta dos dedos;
- Se não for possível usar os dedos, use uma haste flexível de algodão.




Após assepsia, enxaguar com solução salina sem conservante em abundância até remover toda a solução multiuso;



Encher a parte côncava da lente com solução salina sem conservante;

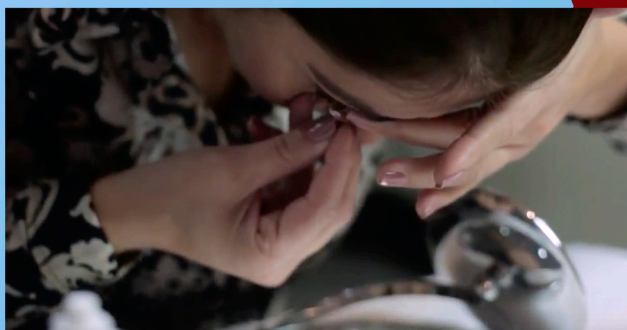

Posicionar-se formando um ângulo de 90°, (rosto paralelo ao chão) para melhor colocação da lente, evitando que haja desperdício indevido de solução. Segurar as pálpebras bem abertas e aplicar a lente sobre a superfície do olho, mantendo os dois olhos abertos;

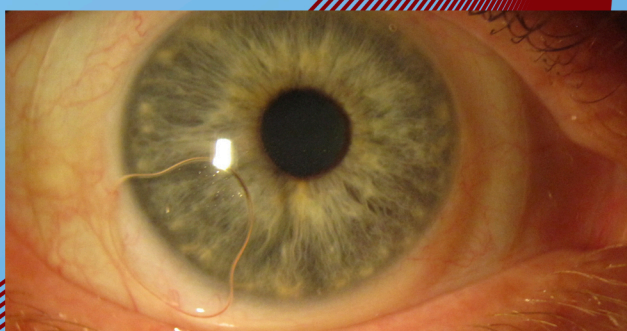

Encher bastante a lente é vital para evitar formação de bolhas. Se formar bolha, retire e repita o procedimento quantas vezes necessário;

MANUSEIO E LIMPEZA

REMOÇÃO - USANDO A VENTOSA:

A maioria dos usuários remove a lente com uma ventosa:

- Colocar a ventosa no 1/3 inferior da lente ou no lado temporal enquanto olha para o lado nasal, mas sempre na periferia da lente e não no centro;
- Desfazer a sucção da lente pingando algumas gotas de soro fisiológico e movimentando a lente com o dedo indicador em todas as direções até desfazer a vácuo. **ESTÁ MANOBRA É ESSENCIAL;**

REMOÇÃO - USANDO OS DEDOS:

- Desfazer a sucção de lente pingando algumas gotas de soro fisiológico e movimentando a lente com dedo indicador em todas as direções até desfazer o vácuo. **ESTA MANOBRA É ESSENCIAL;**
- Para remoção manual, faça pressão com uma das mãos na borda superior e com a outra na borda inferior e empurre a lente para fora da superfície ocular.

Ao retirar a lente é necessário limpá-la com Solução Multiuso para Lentes RGP's antes de acondicioná-la no estojo;

CUIDADOS COM ESTOJO

- O estojo deve ser esvaziado diariamente após a retirada das lentes. Lave com água corrente, escova limpa e sabão neutro. Não utilize toalhas, toalhas de papel ou algodão para secar.
- Ao retirar as lentes antes de dormir, preencha o estojo com a solução multiuso e armazene-as até o dia seguinte.
- Se usar escova para lavar o estojo, a mesma deve ter somente esta finalidade;
- Não usar água de torneira para lavar as lentes, uma vez que podem ser fonte de contaminação por fungos.

